

NEU!

SANDWICH® OT TWO

HANDGELENKORTHESE

NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

DIAGNOSE / VERWENDUNG

- Ruhigstellung des Handgelenks nach operativen Eingriffen, Gelenkkontrakturprophylaxe
- Karpaltunnelsyndrom
- Tendovaginitis
- rheumatische Arthritis

OFENEINSTELLUNGEN

Umluftofen ca. 150 C°

Infrarotofen ca. 140 C°

Aktivierzeit ca. 5-6 Minuten

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Verklebung mit LaNe® TECH HT – Spezialkleber für flexible und hochtemperaturbeständige Klebungen in der Orthopädietechnik.


MATERIALZUGABE

Pro Seite jeweils 4 cm zugeben, davon die letzten 2 cm mit Klebstoff einstreichen.



Anwendungsbeispiel

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

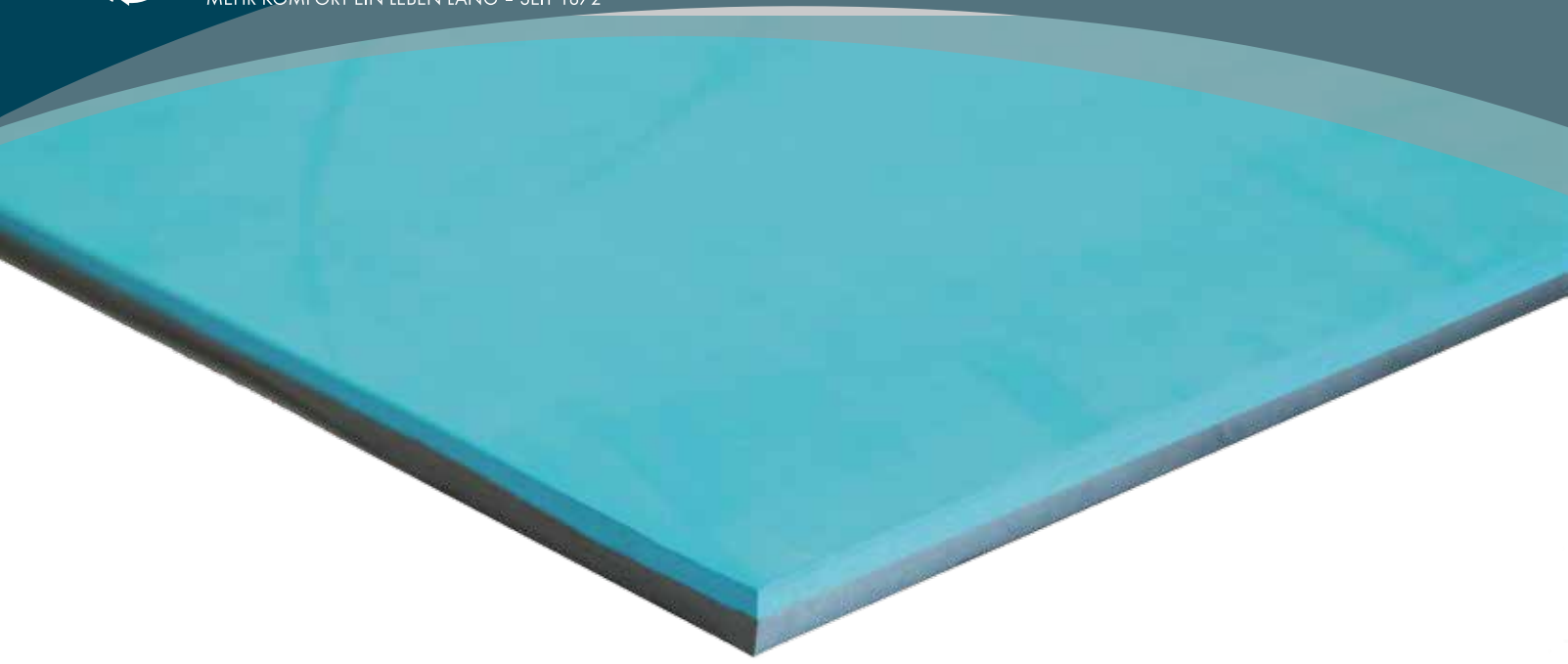

NEU!
SANDWICH® OT TWO
HANDGELENKORTHESE

Gesamtstärke ca. 9 mm
Plattenformat ca. 1320 x 800
Art. Nr. 85902

EINZELKOMPONENTE	FUNKTION	FARBE	STÄRKE
EVA ca. 25 Shore A	polsternd	karibikblau	ca. 4 mm
EVA ca. 70 Shore A	stützend	steingrau	ca. 5 mm



Anwendungsbeispiel

**Wir freuen uns auf
Ihre Anfrage!**